

СТЕРИЛНИ БРИСЕВИ СА И БЕЗ ТРАНСПОРТНОГ МЕДИЈУМА

Намењено за једнократну употребу. Штапићи за брис су стерилисани етилен-оксидом или зрачењем (назначено на примарној амбалажи). Транспортни медијуми су медицинска средства за ин-витро дијагностику (IVD), док штапићи за брис, са или без медијума, спадају у медицинска средства (MDD) која носе сертификат CE0318.

Штапић је израђен од дрвета, пластике, упреденог алуминијума или крутог алуминијума, док је врх од памука, стандардно, полиестера или вискозе.

Намена:

Брисеви са и без транспортног средства су стерилни инвазивни производи за узимање узорка директним контактом са пацијентом, хируршког типа, са и без транспортног средства за накнадну микробиолошку анализу, од стране специјализованог здравственог особља и под одговарајућим хигијенским условима. Брис је намењен за употребу у клиничко-болничком окружењу.

Изглед производа:

- Стерилни штапићи за брис појединачно упаковани у врећицу која се отвара одлепљивањем, у ширу кесицу или у бочицу.

- Штапићи за брис са транспортним медијумом се испоручују појединачно упаковани у кесицу која се отвара одлепљивањем, и у свакој се налази по један штапић за брис и епрувета са транспортним медијумом.

Упозорења:

1. Ако се паковање јединице поквари, немојте користити брис јер не гарантује стерилност.
2. Немојте користити ако било која компонента недостаје или ако одштампане информације о производу нису исправно приказане.
3. Одбаците производ ако нађете прљаву, сломљену и/или расцепкану четку и/или са главом која није збијена и/или без ње.
4. Не користите ако је истекао рок трајања.
5. Не користите ако се примети промена на превозном средству.
6. Ни у ком случају немојте гутати транспортно средство.
7. Само за једнократну употребу. Поновна употреба овог производа може изазвати инфекције.
8. Пажљиво рукујте. Иако је мало вероватно, примена превеликог притиска током употребе може да сломи четку. Ако се поквари, одмах баците.

9. Четке без транспортних средстава не захтевају посебне услове складиштења. За брисеви са транспортним средствима препоручљиво је да се чувају на сувом месту, заштићеном од сунчеве светлости и на температури између 2-30°C.

Опште мере предострожности:

1. Није погодно за употребу у друге сврхе осим за предвиђену намену.
2. У случају педијатријске употребе, препоручује се да користите штапиће за брис са пластичним или алуминијумским телом.
3. Предвиђени крајњи корисници без потешкоћа користе штапиће за брис.
4. Штапићи за брис са транспортним медијумом садрже упутства са шемама употребе на примарној амбалажи (кесици која се отвара одлепљивањем).
5. Након употребе, штапићи за брис се морају деконтаминирати или третирати као контаминирани медицински отпад. Обавеза је сваке лабораторије да отпадом манипулише сходно прописима и да исто тако обрађује и одлаже отпад. Неискоришћени штапићи за брис се могу сматрати безбедним производима и могу се сходно томе одложити.

















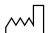

Референце:

1. Cufé J. et al. A superficial swab culture is useful for microbiologic Diagnosis in Acute Prosthetic Joint infections. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Importancia del diagnóstico de laboratorio y la toma de muestras para el diagnóstico y tratamiento de micosis en Podología. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. García JM, et al. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el laboratorio de Microbiología. Procedimientos en Microbiología Clínica. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 2017.

Ref	Descripción	Description
300200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	ESCOBILLON PS+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSA
300203	ESCOBILLON ALU+ALGODON PEEL	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	ESCOBILLON MAD.+ALGOD.B/2 PEEL	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	ESCOBILLON ALU.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE PS+VISCOSA
300253	ESCOBILLON ALU.+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSA
300261	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	ESCOBILLÓN 13X165MM PS C/POLIÉSTER	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
300212.1	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/2	SWAB PEEL/2 PS+VISCOSA
310200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON FLOW	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	ESCOBILLON PS+VISCOSA FLOW	PS+VISCOSA SWAB FLOW
300250.M	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON

Ref	Descripción	Description
300252W	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO T/BLANCO	SWAB IN TUBE PS+VISCOSA WHITE CAP
300261.M	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PS+COTTON
300280	CARY BLAIR MADERA+ALGODON	CARY BLAIR SWAB WOOD+COTTON
300281	AMIES ALUMINIO+VISCOSA	AMIES SWAB ALUMINIUM+VISCOSA
300285	AMIES CARBON PS+VISCOSA	AMIES+CHARCOAL SWAB PS+VISCOSA
300287	AMIES PS+VISCOSA	AMIES SWAB PS+VISCOSA
300290	STUART MADERA+ALGODÓN	STUART SWAB WOOD+COTTON
300291	STUART ALUMINIO+ALGODÓN	STUART SWAB ALUM+COTTON
300295	STUART 13X165MM PS C/VISCOSA	STUART 13X165MM PS W/VISCOSA
300298	VIRUS 2ML PS+VISCOSA	VIRUS 2ML SWAB PS+VISCOSA
300280.2	CARY BLAIR PS+VISCOSA	CARY BLAIR SWAB PS+VISCOSA
300281/1	ESC. AMIES+CARBON ALUM.VISCOSA	AMIES CHARCOAL SWAB WIRE+VISCOSA
300284.SE	AMIES LIQUIDO PS+VISCOSA S/ESPONJA	AMIES SWAB LIQUID PS+VISCOSA NO SPONGE
300299.SE	CHLAMYDIA PS+POLIESTER S/ESPONJA	CHLAMYDIA SWAB PS+POLYESTER NO SPONGE


Речник симбола:

 REF Каталошки број	 LOT Број серије	 Погледајте упутства за употребу на веб-локацији www.deltalab.es/eifus	 QTY Количина	 STERILE R Стерилисано зрачењем
 IVD Ин-витро дијагностичко	 MD медицинско средство	 Не користите ако је амбалажа оштећена	 Не користите више од једном	 STERILE EO Стерилисано етилен-оксидом
 Држите заштићено од сунчеве светлости	 Произвођач	 Рок употребе	 CE Ознака CE	 30°C Температура чувања
 UDI Јединствени идентификатор средства	 Датум производње	 Систем са једном стерилном баријером		

У случају тежег инцидента* у вези са овим производом, обавестите компанију „Deltalab, S.L.“ и надлежне институције земље корисника. *Под „тежим инцидентом“ сматра се инцидент који за исход има смрт или тешко нарушавање здравља пацијента или корисника или велику претњу по јавно здравље.

Штапић за брис са узимање узорка: 

Бочица са медијумом: 

 DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es