

NEILONA FLOKĒTS SVĀBS AR UN BEZ TRANSPORTBAROTNES

Paredzētais lietojums:

Sterila ķirurģiska tipa invazīvu paraugu savākšanas sistēma tiešā saskarē ar pacientu, ar un bez transportēšanas/bagātināšanas vides.

Paredzēts vienreizējai lietošanai. Sterilizācijas metode ir norādīta primārajā iepakojumā. Transportēšanas materiāli ir medicīniskās ierīces in vitro diagnostikai (IVD), savukārt svābi ar vai bez barotnes ir medicīniskās ierīces (MD), kas sertificētas ar CE0318.

Izskats:

Tampons sastāv no polistirola kociņa un flokētas neilona galvas. Tiem ir dažādas formas un izmēri atkarībā no paraugu savākšanas vietas: standarta uztriepe, kas iegūta no urīnizvadkanāla, nazofaringeāla uztriepe un mini uzgalis. Produkts, kas paredzēts bioloģisko paraugu savākšanai un transportēšanai mikrobioloģiskai analīzei, ko veic profesionāli veselības speciālisti un atbilstošos higiēnas apstākļos.

Flokēti svābi bez barotnes ir atsevišķi iepakoti mēģenē, noņemamā iepakojumā vai plūsmas iepakojumā. Flokēti svābi ar transportbarotni, kas satur transportēšanas materiālu, ir atsevišķi iepakoti noņemamā vai plūsmas iepakojuma maiņiņā.



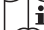

















Tampons ir paredzēts lietošanai divās fāzēs:

- 1) parauga ņemšana, ko veic veselības speciālists klīniski slimnīcas vidē un transportēšana.
- 2) parauga apstrāde, ko veic specializēts veselības personāls klīniskās slimnīcas apstākļos. Tampona lietošana paredzētajiem lietotājiem nesagādā grūtības, jo komplekta traukā ir norādīti īpaši norādījumi par to, kā lietotājam jāveic pareiza paraugu ņemšana un tā apkope līdz tā piegādei laboratorijā.

Piesardzības pasākumi:

Nav piemērots jebkuram citam lietojumam, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietot, ja uz iepakojuma ir kādas lūzuma vai bojājumu pazīmes. Ja redzat, ka vienības iepakojums ir zaudējis savu integritāti, nelietojiet tamponu, jo nav garantijas par tā sterilitāti. Nelietojiet, ja pamanāt, ka tampons ir netīrs. Izmetiet produktu, ja atrodat salauztas otas ar malām vai bez galvas. Nelietot, ja transportēšanas tampona šķidrums ar barotni ir duļķains vai šķiet izmainīts. Tikai vienreizējai lietošanai, šī produkta atkārtota izmantošana var izraisīt infekcijas. Rīkojieties uzmanīgi. Jebkurš spēcīgs spiediens lietošanas laikā, kaut arī maz ticams, var salauzt tamponu. Bojājumu gadījumā nekavējoties izmetiet to. Tamponiem bez transportēšanas līdzekļiem nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Transportēšanas tamponi ar barotni jāuzglabā temperatūras diapazonā no 2 °C līdz 30 °C. Sargāt no mitruma. Pēc lietošanas uztriepes ir jādezinficē vai jāapstrādā kā piesārņoti medicīniskie atkritumi, izņemot uztriepes, kas tiek izmantotas ar vīrusu inaktivējošu vidi MTVI, kuras uzskata par vispārējiem atkritumiem, jo paraugā esošais vīrusa paraugs ir inaktivēts. Katra laboratorija ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanu, apstrādi un apglabāšanu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Neizmantojam tamponus, kas ir uzskatīti par produktiem, kas nav bīstami, un tos var attiecīgi iznīcināt. Viss iepriekš minētais attiecas uz bagātināto vidi, kas piegādāta ar flokētu svābu. Nelietot, ja ir beidzies derīguma termiņš. Neizmantojiet, ja trūkst kāda komponenta vai ja drukātā produkta informācija nav parādīta pareizi. Nekādā gadījumā nedrīkst norīt transportlīdzekli.

Simbolu vārdnīca:

 REF	Kataloga numurs	 LOT	Partijas numurs	 i	Skatiet lietošanas instrukcijas tīmekļa vietnē www.deltalab.es/eifus	 QTY	Daudzums	 STERILE R	Sterils līdz apstarošana
 IVD	In vitro diagnostika	 MD	Medicīniska iekārta		Nelietot, ja iepakojums ir bojāts		Nelietot atkārtoti	 STERILE EO	Sterils līdz Etilēna oksīds
	Sargāt no saules gaismas		Ražotājs		Derīguma termiņš	 CE	CE marķējums		Uzglabāšana temperatūra
 UDI	Ierīces unikālais identifikators		Ražošanas datums		Unikāla sterila barjeru sistēma	 0318	CE marķējums		Uzglabāt sausu

Ja noticis nopietns incidents* saistībā ar izstrādājumu, ziņojiet Deltalab, SL, kā arī tās valsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs ir reģistrēts. **Nopietns incidents" tiek saprasts kā tāds, kas izraisa pacienta vai lietotāja nāvi vai nopietnu veselības pasliktināšanos vai nopietnus draudus sabiedrības veselībai.

Tampons savākšanai:  CE 0318  MD

Aurule ar barotni:  CE  IVD



DELALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es

Reference	Description
300264	SWAB IN TUBE PS FLOCK STANDARD 100MM
300267	SWAB IN TUBE PS FLOCK NASOPH.100MM
300269	FLOCKED SWAB PS STANDARD 80MM TUBE
310206K	FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
310207K	FLOCKED SWAB NASOPH. BP 80MM FLOW
310208K	FLOCKED SWAB NASOPH. BP 100MM FLOW
304230	VICUM 2ML FLOCKED SWAB NASO 100MM
304225F	AMIES 1ML FLOCKED SWAB NASOPH. 100MM FLOW
304246F	VIRUS 3ML FLOCK SWAB MINITIP 100MM FLOW
304230K.2S	VICUM 2ML FLOCKED ST80MM+NASO 80MM
304230KF.2S	VICUM 2ML FLOCK SWAB STD80MM+NASO80MM FLOW
304222KF	AMIES 1ML FLOCKED SWAB URETRAL 80MM FLOW
304234KF	VICUM 2ML FLOCKED SWAB NASOPH.80MM FLOW
304221KF	AMIES 1ML FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
304221KF.2S	AMIES 1ML FLOCKED NASOPH 80MM+ST 80MM FLOW
304223KF	AMIES 1ML FLOCK.SWAB NASOPH. 80MM FLOW
304224KF	AMIES 1ML FLOCK.SWAB MINITIP 80MM FLOW
304260KF	CARY BLAIR 2ML FLOCK.SWAB ST. 80MM FLOW
304305KF	VIRUS 3ML FLOCK SWAB NASOPH. 80MM FLOW
304243KF	VIRUS 3ML FLOCK SWAB STANDARD 80MM FLOW
304227KF	AMIES 2ML FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
304243KFI	INACT. VIRUS 3ML FLOCK.SWAB ST 80MM FLOW
304305KF.2S	VIRUS 3ML FLOCK SWAB STD 80MM+NAS80MM FLOW
304305KFI	INACT. VIRUS 3ML FLOCK SWAB NAS. 80MM FLOW
304230F	VICUM 2ML FLOCK SWAB NASOPH. 100MM FLOW
304236KF	VICUM 2ML FLOCK SWAB URET. 80MM FLOW
304213KF	LIM BROTH 2ML FLOCK SWAB STD 80MM FLOW
304238KF	VICUM 2ML FLOCK SWAB STD 80MM FLOW
304305KFI.2S	INACT. VIRUS 3ML FLOCKED STD80MM+NAS 80MM FL.
304228KF.3	AMIES 3ML 3 FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
304213KFB	GAL.VAG. LIM BROTH 2 ML FLOCK SWAB ST. FLOW
304221KF.M	AMIES 1ML FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
304223KF.M	AMIES 1ML FLOCK SWAB NASOPH. 80MM FLOW
304224KF.M	AMIES 1ML FLOCK.SWAB MINITIP 80MM FLOW
304222KF.M	AMIES 1ML FLOCKED SWAB URETRAL 80MM FLOW
304233F	VICUM 3ML FLOCK SWAB STD 100MM FLOW
304233F.2S	VICUM 3ML FLOCK SWAB ST100MM+NAS100MM FLOW
304239KF	VICUM 2ML FLOCK SWAB MINITIP 80MM FLOW