


# Frasco de 60ml para vacío con precinto de esterilidad

Un producto innovador, práctico y sostenible



Environmental friendly

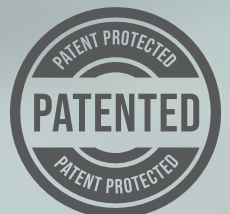



## ¡Adiós a la bolsa unitaria!

Nuevo frasco de recogida de muestras de orina con sistema de vacío fabricado en Deltalab en condiciones estériles (Sterile A).

Su innovador diseño, con sistema patentado de cierre con precinto de molde, asegura tanto la esterilidad como la inviolabilidad, eliminando la necesidad de bolsa unitaria para garantizar su esterilidad.

Su volumen es de 60ml permite optimizar el espacio de recogida adaptándonos a los protocolos sanitarios y a su vez conseguir claras ventajas a nivel funcional, logístico y medioambiental.

Con el sistema al vacío se consigue una transferencia segura de la orina del frasco al tubo eliminando el riesgo de pérdidas, salpicaduras o de contaminación cruzada en el trasvase.



código	descripción	capacidad	vol. máx.	cant.caja
409531	Frasco 60ml con precinto	60ml	82ml	650
409520	Conjunto frasco + tubo al vacío	60 ml 9ml	82ml 9ml	250



Directiva 98/79/CE. Productos sanitarios para diagnóstico "in vitro"

## Sus múltiples ventajas son...

- Se elimina el envoltorio de plástico gracias a la **incorporación del precinto de esterilidad en el propio frasco** y esto implica una reducción significativa de residuos plásticos de aprox. el 32%
- Este nuevo frasco tiene un **amplio diámetro de boca de 56mm** que ofrece una gran comodidad al usuario.
- Se **economiza una gran cantidad de materia prima**, obteniendo un producto mucho más sostenible.
- Gracias a su menor tamaño, se consigue un considerable **ahorro de espacio** en transporte y almacenamiento.
- La **etiqueta** es también un elemento clave de este nuevo producto conteniendo toda la información necesaria y reglamentaria para su uso y garantizando una total trazabilidad de la muestra.
- Su innovador diseño con la **aguja sobremoldeada** (y no roscada) evita cualquier tipo de fuga.
- La **baja posición de la aguja** reduce al máximo el volumen muerto residual que permanecerá en el frasco.
- Es **compatible** con la gran mayoría de tubos de orina al vacío del mercado.